


NeoBridge[®]

SOPORTE DE CATÉTER UMBILICAL

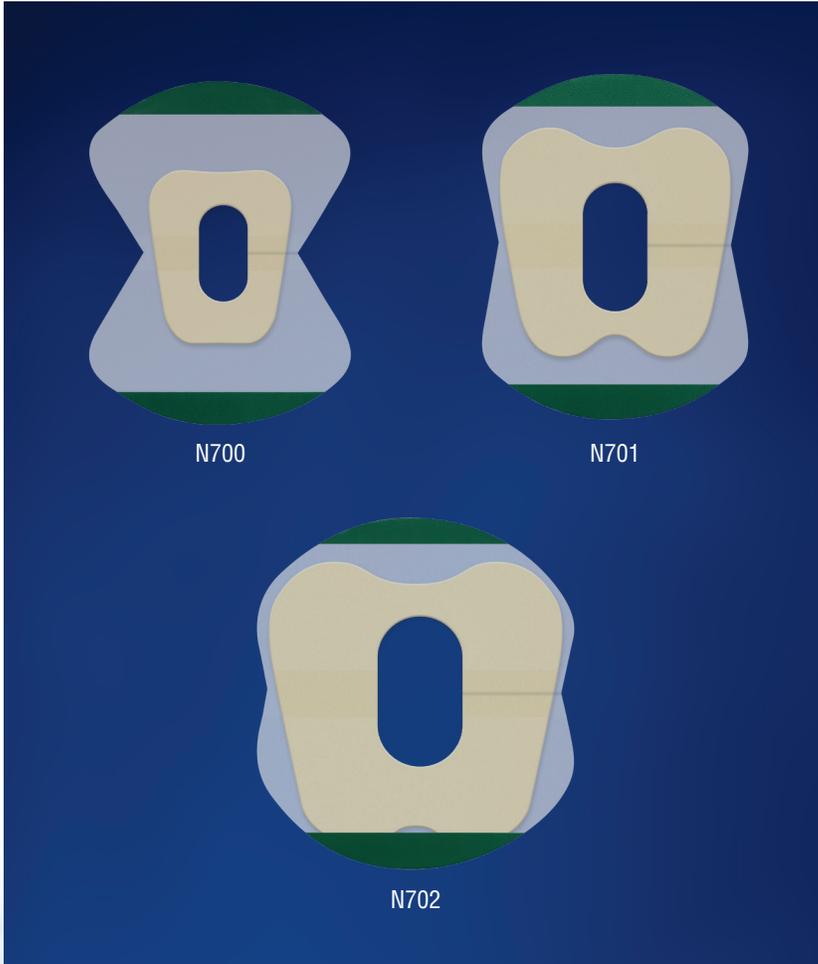

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Base hidrocóloide NeoBond[®] respetuosa con la piel
- Tapaderas fijadoras de posición diseñadas para aliviar la presión de los tubos y ayudar a evitar que estos se disloquen
- Se adapta a dos catéteres
- Tapadera diseñada para abrirse y cerrarse repetidamente
- La tapadera transparente mejora la visibilidad
- No fabricado con látex de caucho natural o DEHP plastificante
- Envasado individual

Número	Tamaño	Peso Aprox.	Cant./Unidad
N700	Micro	800 or less	20/caja
N701	Pequeño	800-1200 gm	20/caja
N702	Grande	1200-2200 gm	20/caja



Patente #5,370,627



Clínico Inventado



Hecho en EEUU

NeoBridge®

SOPORTE DE CATÉTER UMBILICAL

INDICACIONES DE USO

El NeoBridge está diseñado para fijar y sujetar catéteres umbilicales. Está destinado al uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, lactantes y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Después de introducir el catéter, limpie y seque la piel según el protocolo hospitalario.

Nota: es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. NeoBridge no se adherirá adecuadamente a la piel o al cabello húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán de forma negativa a la adhesión.

NO USE ALCOHOL.

Aplicación

- 1 Antes de retirar los recubrimientos, caliente NeoBridge en las manos durante 60 segundos. También puede colocarse debajo de un radiador o calentador de talones entre 10 y 15 segundos.
- 2 Deseche el recubrimiento de papel blanco y, a continuación, despegue y deseche el recubrimiento de plástico transparente de la base hidrocóloide.
- 3 Con la hendidura en el lado derecho y el extremo más ancho de la base en dirección a la cabeza del paciente, deslice NeoBridge alrededor del catéter.
- 4 Aplique la base a la piel y manténgala en su lugar durante 60 segundos para garantizar que se adhiere adecuadamente.
- 5 Despegue y deseche el recubrimiento esmerilado de la tapadera superior. Levante la tapadera y adhiérela al catéter.
Nota: el catéter debería salir por el lateral de la tapadera. No superponga la lengüeta verde. Si usa dos catéteres, haga que un catéter salga por cada lado de la tapadera.
- 6 Despegue y deseche el recubrimiento esmerilado de la tapadera inferior. Levante el catéter para alinearlos con la tapadera superior y presione con firmeza, envolviendo el catéter entre los adhesivos.
- 7 Aparte las tapaderas para retirar o recolocar los catéteres si es necesario, a continuación, cierre para fijar.

Extracción

- 1 Sustituya NeoBridge cada 5 días o según el protocolo hospitalario, el plazo que sea más breve.
- 2 Aparte las tapaderas para retirar los catéteres.
- 3 Llene NeoBridge con agua o solución salina.
- 4 Retire lentamente NeoBridge de la piel mientras la limpia con agua o solución salina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo exclusivamente a personal médico o a través de una prescripción médica.

NeoBridge solo debe utilizarse mientras el paciente esté bajo supervisión directa y continua de un profesional sanitario cualificado.

Interrumpa el uso de inmediato si se presenta irritación en la piel.

NeoBridge no se adherirá adecuadamente a la piel o al cabello húmedos. Los aceites y las lociones afectarán de forma negativa a la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Uso limitado a un único paciente.



Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • neotechproducts.com

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2021 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M652 Rev A